



NexxZr. Glaze Spray

---

Effective glazing.  
Efficient processing.

Effective glazing.  
Efficient processing.

# NexxZr® Glaze Spray



Το NexxZr® Glaze Spray είναι ένα γυαλιστικό σπρέι από εξαιρετικά υψηλής αντοχής υαλοκεραμικό πυριτικού λιθίου για την ολοκλήρωση μονολιθικών αποκαταστάσεων από οξειδίο ζirkονίου.

Το βέλτιστο μέγεθος των σωματιδίων υάλου, καθώς και το ειδικά ρυθμισμένο για λεπτά σωματίδια ακροφύσιο ψεκασμού επιτρέπει μία ελαφρά, ομοιόμορφη και πολύ λεπτή εφαρμογή του υλικού. Ακόμα και ένα λεπτό στρώμα παρέχει ισχυρό δεσμό συγκόλλησης με το οξειδίο ζirkονίου και έχει ως αποτέλεσμα μία λεία, ομοιογενή επιφάνεια - διατηρώντας ακόμα και τις πιο δύσκολες λεπτομέρειες της επιφάνειας. Τα φιλικά προς τους ανταγωνιστές χαρακτηριστικά φθοράς του υαλοκεραμικού πυριτικού λιθίου παρέχουν μακράς διάρκειας προστασία για τις περιοχές υψηλής καταπόνησης (π.χ. τα σημεία επαφής).

## Τεχνικά δεδομένα



**Τύπος**  
Υαλοκεραμικό  
διπυριτικού λιθίου



**Αντοχή σε κάμψη**  
> 140 MPa



**Φωτοδιαπερατότητα**  
> 90%, διαφανές



**Αντοχή δεσμού**  
> 35 MPa



**Αποτριβή**  
μη-μετρήσιμη

**1 Υψηλής αντοχής υαλοκεραμικό πυριτικού λιθίου**  
Ισχυρός δεσμός συγκόλλησης με το  $ZrO_2$  και λείες, ομοιογενείς επιφάνειες



Εφαρμογή εξαιρετικά λεπτού στρώματος υλικού περίπου 10  $\mu m$  και ισχυρός δεσμός συγκόλλησης (συμβατικές πάστες υάλωσης περίπου 40-50  $\mu m$ )

Λείες, ομοιογενείς επιφάνειες χωρίς απώλεια της δομής της επιφάνειας

---

**2 Βέλτιστο μέγεθος σωματιδίων υάλου και ειδικά ρυθμισμένο για λεπτά σωματίδια ακροφύσιο ψεκασμού**  
Εφαρμογή ελαφρού, ομοιόμορφου και πολύ λεπτού στρώματος υλικού σε δευτερόλεπτα



Ψεκασμός εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων




Εφαρμογή ελαφρού, ομοιόμορφου και πολύ λεπτού στρώματος υλικού σε δευτερόλεπτα

---

**3 Φιλική προς τους ανταγωνιστές αντοχή στη φθορά**  
Μεγάλης διάρκειας προστασία για περιοχές υψηλής καταπόνησης, π.χ. τα σημεία επαφής




Μεγάλη αντοχή στην αποτριβή για προστασία που διαρκεί

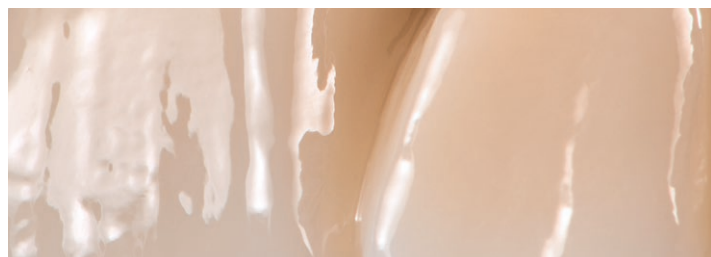



Λείες, ομοιογενείς επιφάνειες

## Χρόνοι & Κατανάλωση



Χρόνος ψεκασμού  
ανά στεφάνη\*  
**περίπου  
10-15 δευτερόλεπτα**

Στεφάνες ανά  
φιάλη ψεκασμού\*  
**περίπου  
50-60 κομμάτια**



\* Εσωτερικές δοκιμές

## Μορφές παράδοσης

Φιάλη ψεκασμού  
75 ml

## Άλλα κορυφαία προϊόντα



### NexxZr+ Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  
φυσική αισθητική




### NexxZr T Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  
πολυλειτουργική αισθητική και  
ευρύ φάσμα ενδείξεων



### NexxZr+

Ένα οξείδιο ζirkονίου με υψηλή  
φωτοδιαπερατότητα για  
αισθητικές πρόσθιες και οπίσθιες  
αποκαταστάσεις

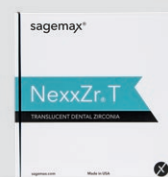

### NexxZr T

Ένα οξείδιο του ζirkονίου με  
μέτρια φωτοδιαπερατότητα και  
υψηλή αντοχή στην κάμψη για  
ποικίλες ενδείξεις και εναλλακτικές  
δυνατότητες επεξεργασίας

Sales & Technical Support EMEA  
EC Representative AB Ardent  
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden  
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com  
sagemax.com